


Rampe

Les **Lyres** et les **Genouillères** permettent le raccordement des bouteilles aux **Boîtes à clapets**. Leur raccord d'entrée (du côté de la bouteille) est fonction du gaz.



Genouillère avec adaptateur

Lyre et Genouillère

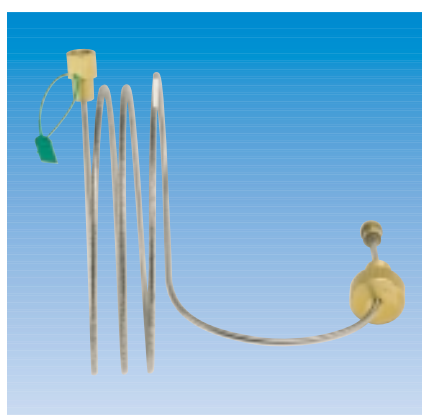

Lyre O₂

Sécurité

- Les **LYRES** et les **GENOUILLÈRES** sont livrées avec des plombes de sécurité à fixer sur la **BOÎTE À CLAPETS**.

Entretien et maintenance

- Changement du joint du côté de la bouteille s'il est détérioré.
- Changement du joint du côté de la **BOÎTE À CLAPETS** et sur l'adaptateur de **GENOUILLÈRE** tous les 5 ans.

Caractéristiques

Pression d'utilisation : jusqu'à 200 bar.

Raccords d'entrée : NF Type C, D, F ou G suivant le gaz.

Matériaux : **Lyres** en inox, **Genouillères** en cuivre et laiton.

références

Référence	Désignation	Gaz	Raccord d'entrée
AC100200	LYRES	O ₂	NF Type F
AC100500	LYRES	Air	NF Type D
AC100800	LYRES	N ₂ O	NF Type G
AC101400	LYRES	N ₂ et CO ₂	NF Type C

Les **Lyres** sont livrées par 2 : une **Lyre** pour la fixation de la bouteille à gauche et une **Lyre** pour la fixation de la bouteille à droite.

références

Référence	Désignation	Gaz	Raccord d'entrée
AC067000	GENOUILLÈRE	O ₂	NF Type F
AC068000	GENOUILLÈRE	Air	NF Type D
AC067600	GENOUILLÈRE	N ₂ O	NF Type G
AC067100	GENOUILLÈRE	N ₂ et CO ₂	NF Type C
AC101700	ADAPTATEUR DE GENOUILLÈRE	Tous gaz	

Les **Genouillères** se montent indifféremment à gauche ou à droite et sont livrées à l'unité. L'adaptateur est nécessaire pour le raccordement de chaque **Genouillère** aux **Boîtes à clapets**. Ils sont à commander séparément.

pièces détachées

Référence	Désignation	
YJ040600	Joint torique R5 silicone rose (x 10)	48
YJ102500	Joint torique 10.5 x 2.7 (x 10)	53

accessoires et consommables

Référence	Désignation	Gaz	Raccord d'entrée
AC101500	Bouchon de Lyre et Genouillère O ₂ NF type F	O ₂	NF Type F
AC101900	Bouchon de Lyre et Genouillère AIR NF type D	Air	NF Type D
AC101800	Bouchon de Lyre et Genouillère N ₂ O NF type G	N ₂ O	NF Type G
YJ040600	Joint torique R5 silicone rose (x 10)		
YA011100	Scellé compact « neutre »		

