

Débitmètre *SELECTAFLO*

Débitmètre à orifices calibrés destiné à délivrer un gaz à partir d'une prise médicale basse pression (prise murale ou prises de sortie de détendeur).

Nouveau raccord NF Easy clic



Performance

Nombreuses plages de débits disponibles
Système d'encliquetage de la valeur du débit évitant tout changement par inadvertance.

Système à orifices calibrés permettant un débit optimal dans toutes les positions.

Raccord d'entrée équipé d'Easy clic.

Grande stabilité des débits

Grâce à une détente intégrée le débit est complètement indépendant des fluctuations de la pression du réseau et de la contre-pression générée en aval par les accessoires de raccordement :

Innovation **TAEMA**

Facilité d'utilisation

Lecture instantanée par le haut et en façade du débit délivré.

Design étudié facilitant sa manipulation, son réglage et son nettoyage pour une meilleure hygiène.

Livré avec son olive de branchement de tubulures d'oxygénothérapie.

Inviolabilité : accès aux composants internes protégé par une pastille témoin et étiquette.

Caractéristiques

Principaux gaz disponibles : Oxygène, Air médical.

Pression d'alimentation : de 2 à 6 bar.

Plage de débits disponibles :

- 0 - 3 l/min (0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3)
- 0 - 6 l/min (0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6)
- 0 - 15 l/min (0 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 15)
- 0 - 50 l/min (0 - 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 30 - 50)

Olive de sortie : 12 x 125 (standard français) ou 9/16 (standard anglo-saxon).

Poids (version NF) : 400 g.

Encombrement (version NF) : 185 x 128 x 30 mm.

Marquage CE 0120 classe IIa.

Hygiène

Nettoyage : avec un chiffon légèrement humide.

Désinfection :

- avec une solution à base d'alcool (spray ou lingettes),
- avec une solution marquée CE (type Amphospray 41, Aniospray 41, Wip'Anios).

Attention :

Ne pas utiliser d'abrasif (poudre ou autre).

Ne pas immerger l'appareil.

Maintenance simplifiée

Nombre limité de composants minimisant les risques et les coûts, et réduisant les coûts de maintenance.

Utilisation de pièces communes pour toute la gamme détente et débitmétrie **Taema**.

Temps de démontage et remontage réduits.

Entretien

Vérification des débits au moins une fois par an.

Maintenance préventive tous les 5 ans.



Selectaflo avec raccord Easylic

Humidificateur
Nebal II

Selectaflo 0-15 l/min DIN

Sélecteur double sortie

Références

Type	Référence	Désignation	Gaz	Raccord d'entrée	Plage de débits	Olive de sortie
NF Easylic Nouveau	CM167500	SELECTAFLO	O2	NF	0 à 3 l/min	12 x 125
	CM166500	SELECTAFLO	O2	NF	0 à 6 l/min	12 x 125
	CM164400	SELECTAFLO	O2	NF	0 à 15 l/min	12 x 125
	CM174400	SELECTAFLO (x10)	O2	NF	0 à 15 l/min	12 x 125
	CM075400	SELECTAFLO	O2	NF et attache au rail	0 à 15 l/min	9/16
	CM171400	SELECTAFLO	O2	NF	0 à 50 l/min	
	CM167400	SELECTAFLO	Air	NF	0 à 6 l/min	12 x 125
	CM164500	SELECTAFLO	Air	NF	0 à 15 l/min	12 x 125
	CM075600	SELECTAFLO	Air	NF et attache au rail	0 à 15 l/min	9/16
	CM172700	SELECTAFLO	Air	NF	0 à 50 l/min	
DIN	CM074600	SELECTAFLO	O2	DIN	0 à 15 l/min	9/16
	CM074800	SELECTAFLO	Air	DIN	0 à 15 l/min	9/16
SUISSE	CM070600	SELECTAFLO	O2	Suisse	0 à 6 l/min	9/16
	CM070700	SELECTAFLO	O2	Suisse	0 à 15 l/min	9/16
	CM070800	SELECTAFLO	Air	Suisse	0 à 6 l/min	9/16
	CM070900	SELECTAFLO	Air	Suisse	0 à 15 l/min	9/16

Accessoires et consommables

Référence	Désignation
KP071000	Nebal II PSU polysulfone 12x125
KP001000	Nebal II PSU polycarbonate 12x125
KP070100	Nebal II PSU polycarbonate 9/16
DG062800	Sélecteur double sortie 12x125
DG062900	Sélecteur double sortie 9/16
KY383800	Adaptateur mâle 9/16 femelle 12 x 125
CY008400	Olive de sortie 12 x 125 avec joint (x 10)
CY008300	Olive de sortie 9/16 avec joint (x 10)

Pièces détachées

Référence	Désignation	Repère
CX080900	Cache écrou (x 20)	1
YV203500	Ecrou Nylstop inox (x 100)	2
CX080400	Manchon sérigraphié 0-6 l/min (x 5)	3
CX077300	Manchon sérigraphié 0-15 l/min (x 5)	3
CX080300	Bouton sérigraphié 0-6 l/min (x 5)	4
CX077400	Bouton sérigraphié 0-15 l/min (x 5)	4
CY007900 Kit de maintenance 5 ans SELECTAFLO	Cache écrou	1
	Ecrou Nylstop inox	2
	Joint torique 17 x 2	5
	Vis de réglage	6
	Joint torique D : 14.12 (ext) x 2	7
	Valve	8
	Joint torique R19 bis	9
	Joint torique R00	10
	Filtre conique	11
	Etiquette de contrôle	
	CX072300	Vis de réglage (x 10)
CX075400	Valve (x 10)	8
BY004200	Filtre conique	11
YJ010500	Joint torique 6.5 x 2	12
BJ061300	Raccord d'entrée complet NF O2 (non Easyclic)	
BJ061400	Raccord d'entrée complet NF Air (non Easyclic)	
BJ030200	Raccord d'entrée O2 Easyclic complet NF	11+12+13
BJ030100	Raccord d'entrée air Easyclic complet NF	11+12+13
YJ041400	Joint pour olive 12 x 125 (x 10)	14
KP070900	Joint pour olive 9/16 (x 10)	14
CY008400	Olive de sortie 12 x 125 avec joint (x 10)	14 + 15
CY008300	Olive de sortie 9/16 avec joint (x 10)	14 + 15
YF146100	Etiquette de maintenance O2 (x 10)	
YF155000	Etiquette de maintenance Air (x 10)	

Outillage

Référence	Désignation
YA014300	Kit outillage de maintenance SELECTAFLO - SELECTAFLO PR – PRECI
CY010100	Clé de serrage Easyclic floval selectaflo

- Les opérations de démontage, montage et maintenance doivent être effectuées par des techniciens formés.
- Utiliser des pièces détachées d'origine.




Raccord Easylic



Olive de sortie



Adaptateur mâle 9/16 femelle 12x125

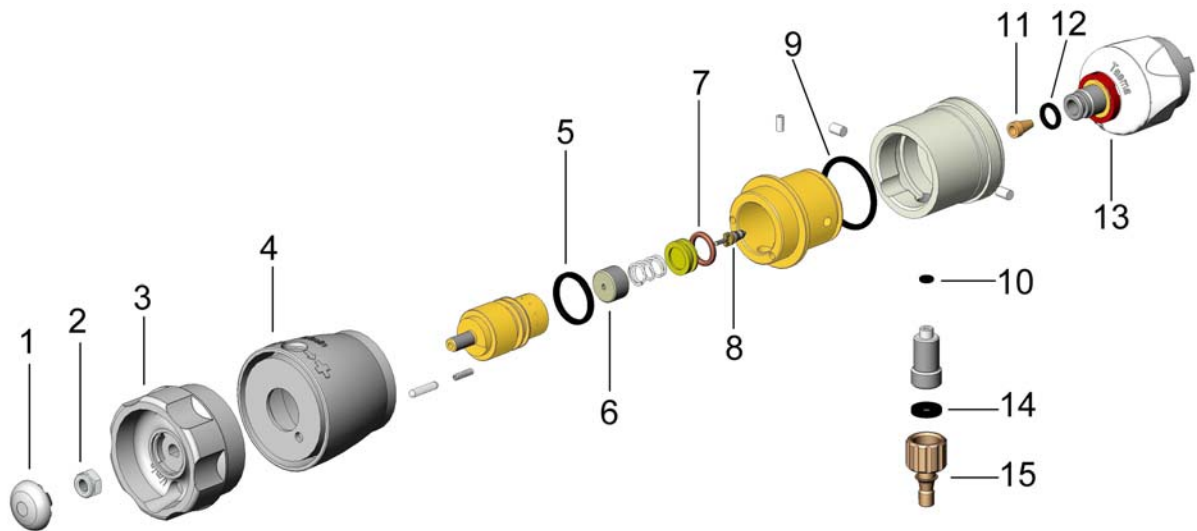

Taema – 6, rue Georges Besse 92182 Antony